



ICAP
Individual Computer Applications

Art. Nr. 203471641

FlexiBlink Larmsändare med 3 knappar

Bruksanvisning



FlexiBlink Larmsändare med 3 knappar är en produkt av FlexiBlink LIFE-serien. Larmsändaren varnar till FlexiBlink LIFE-mottagare.

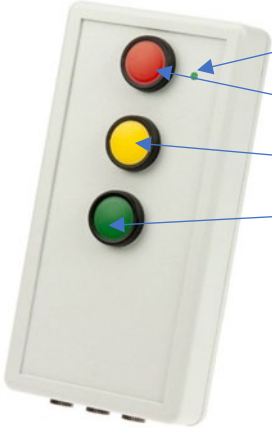
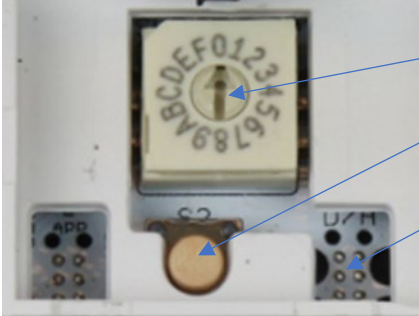
Larmsändaren har tre knappar som skickar olika signaler/meddelanden till FlexiBlink LIFE-mottagarna.

Individual Computer Applications AB
Karl Johansgatan 42
414 59 GÖTEBORG

E-post: info@icap.nu
Webb: www.icap.nu
Org.nr: 556573-8746

Telefon: 010-405 68 50

Mottagaren IRIS LIFE med display visar symboler relaterade till det enskilda meddelandet, samtidigt som den varnar med ljus och ljud. Andra FlexiBlink LIFE-mottagare varnar med ljus, ljud och vibrationer, beroende på produktfunktioner.

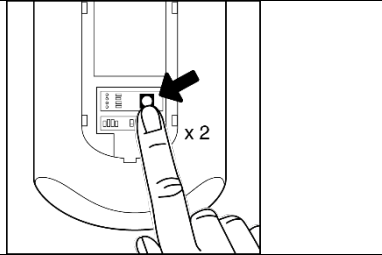
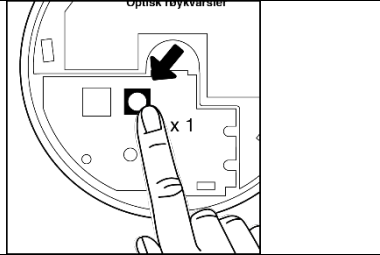
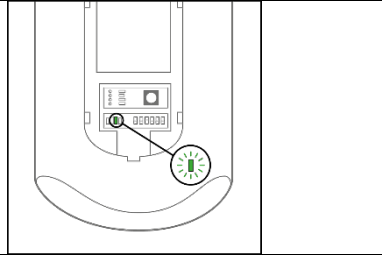
	<ol style="list-style-type: none"> 1. LED 2. Hjälp mig nu! 3. Hjälp mig snart 4. Begärd hjälp
	<ol style="list-style-type: none"> 8. Funktionsväljare (ID-väljare) 9. LIFE-knapp 10. Indikator för ljus

BATTERI OCH LADDNING:

Den levereras med ett litiumbatteri med hög kapacitet (9100100934), vilket säkerställer driften av enheten i många år. Ladda inte batteriet.

SAMMANKOPPLING

Alla FlexiBlink LIFE-enheter som ska fungera tillsammans måste sammankopplas. Detta gör du genom att trycka på LIFE-knappen (9).

		
<p>1. Tryck på LIFE-knappen på en av enheterna 2 gånger.</p>	<p>2. Tryck på LIFE-knappen på den andra enheten 1 gång. Indikatorlamporna på båda enheterna blinkar grönt.</p>	<p>3. Sammankopplingen bekräftas av indikatorlamporna som lyser fast i 2-3 sekunder. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test" -knappen på den ena sändare för att kontrollera sammankopplingen.</p>

SAMMANKOPPLING AV NY ENHET TILL BEFINTLIGT SYSTEM

1. Tryck på LIFE-knappen på enheten från befintligt system 2 gånger.
2. Tryck på LIFE-knappen på den nya enheten 1 gång.
3. Sammankopplingen bekräftas av indikatorlamporna som lyser fast grönt i 2-3 sekunder.
4. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test" -knappen för att kontrollera sammankopplingen.

SAMMANKOPPLINGEN MISSLYCKADES

Om du får ett rött ljus i den nya enheten när du sammankopplar dem, så misslyckades sammankopplingen.

Återställ enheten innan du provar sammankoppla på nytt. (Se nedan).

AVBRYT SAMMANKOPPLINGEN

För att avbryta en sammankoppling, tryck på LIFE-knappen 1 gång.

ÅTERSTÄLL SAMMANKOPPLINGEN

Tryck på LIFE-knappen på enheten där sammankopplingen ska raderas 5 gånger. Detta bekräftas med röda och gröna blinkningar. Om du vill ändra produktens funktioner, se avsnittet "Utökade funktioner".



Art. Nr. 203471641

MONTERING

Larmsändaren kan monteras på vägg eller bord med medföljande kardborreband. Använd den medföljande alkoholpinnen för att rengöra väggen. Tryck fast de självhäftande ytorna ordentligt på plats i minst 10 sekunder.

Anslutning till extern knapp:

Anslutningskontakterna längst ner på Larmsändaren är till för anslutning till externa tryckknappar.

I BRUK

Larmsändaren ger individuella varningar beroende på vilken knapp som används.

Se tabellen nedan för vilka meddelanden skickas.

Knapp	Alert
Röd	Hjälp mig nu!
Gul	Hjälp mig snart!
Grön	Begärd hjälp

FUNKTIONSKONTROLL

På Larmsändaren hittar du en indikatorlampa. Den släcks vanligtvis.

När Larmsändaren skickar meddelanden blinkar lampan grönt. Vid fel blinkar indikatorlampan rött.

VIKTIG INFORMATION:

Produkten kan rengöras med en mjuk, lätt fuktig trasa. Produkten är avsedd för inomhusbruk i icke-kondenserande miljö.

Produkten kommer att meddela mottagarna om behovet av ett batteribyte om du har mottagare som visar detta.

Produkten ska inte lämnas i direkt solljus.

BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING

Får endast användas inom EU/EES.

ÅTERVINNING

Kasta inte produkten med restavfall. Bekanta dig med lokala bestämmelser för deponering



Art. Nr. 203471641

av elektriska produkter. Med rätt hantering kan stora delar av produkten återvinnas, samtidigt som miljön skyddas.

SÄKERHET

Undvik att utsätta enheten för lågor och andra direkta värmekällor. Skruva inte isär produkten.

TEKNISKA DATA

Dim. (bxhxd):	65x130x30 mm	Sändareffekt:	10 mW e.r.p.
Vikt:	140 g	Batteri:	Litium 3V
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkaren Vestfold Audio AS intygar att produkten uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU.

För fullständig dokumentation om överensstämmelse, tag kontakt via e-post:

upphandlingar@icap.nu

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösningar
Det meddelar inte i mottagare	Larmsändaren får ingen signal från källan / den lyser inte grönt.	Tryck på en av knapparna och kontrollera om meddelandet visas.
	Anslutningen till signalkällan misslyckas	Kontrollera anslutningen till signalkällan
	Batteriet i Larmsändaren är tomt/det blinkar rött.	Byt batteri.
	Avståndet mellan Larmsändaren och mottagaren är för stort.	Flytta enheterna närmare varandra eller sätt i en repeater.
	Enheterna är inte parkopplade.	Utför parning.
Parkoppling fungerar inte	Båda enheterna har parats ihop tidigare. Det blinkar rött.	Tryck på LIFE-knappen 5 gånger på enheten som ska läggas till.
Efter TEST-tryckning lyser sändaren rött under lång tid	Enheten är inte ihopkopplad med någon mottagare	Anslut enheten till en mottagare
Efter TEST-tryck lyser sändaren grönt under lång tid, sedan orange under lång tid	Ingen mottagare är ihopkopplad med sändaren	Kontrollera att det finns en mottagare i systemet. Återställ enheten. Återkoppla. Försök igen



ICAP
Individual Computer Applications

Art. Nr. 203471641

Grönt tänds inte när signalen aktiveras.	Sjuksignalsändaren uppfattar inte signalen.	Se till att källan ger rätt signal till ingången.
Det blinkar rött/grönt i Sjuksignalsändaren	Batteriet i Sjuksignalsändaren är snart tomt.	Byt batteri

