



ICAP
Individual Computer Applications

Art nr. 203471653

FlexiBlink IRIS LIFE Larmmottagare

Bruksanvisning



IRIS är en mottagare/larm som tar emot trådlösa signaler från FlexiBlink LIFE-detektorer/sändare installerade i ditt hem. FlexiBlink LIFE används för att meddela om allvarliga incidenter som brandlarm och spisvakter samt dagliga händelser som dörrklocka, telefon och andra relevanta incidenter.

Varningar utlöses när en FlexiBlink Brandvarnare upptäcker rök eller en FlexiBlink Telefonsändare uppfattar att den ringer. Sändarna meddelar sedan trådlöst till alla aviseringsmottagare i hemmet.

Individual Computer Applications AB
Karl Johansgatan 42
414 59 GÖTEBORG

E-post: info@icap.nu
Webb: www.icap.nu
Org.nr: 556573-8746


Telefon: 010-405 68 50



Du kan ha så många varningsmottagare och sändare som du behöver för säkerhet och vardag.

IRIS kan också rapportera var brandlarmet har utlösts. Det är viktigt om du har flera brandvarnare i huset. Det låter dig också veta vilken rökdetektor som behöver bytas ut ur batteriet.

Förutom att fungera som en meddelandemottagare kan IRIS användas som en talande klocka, väckarklocka och nedräkningstimer.

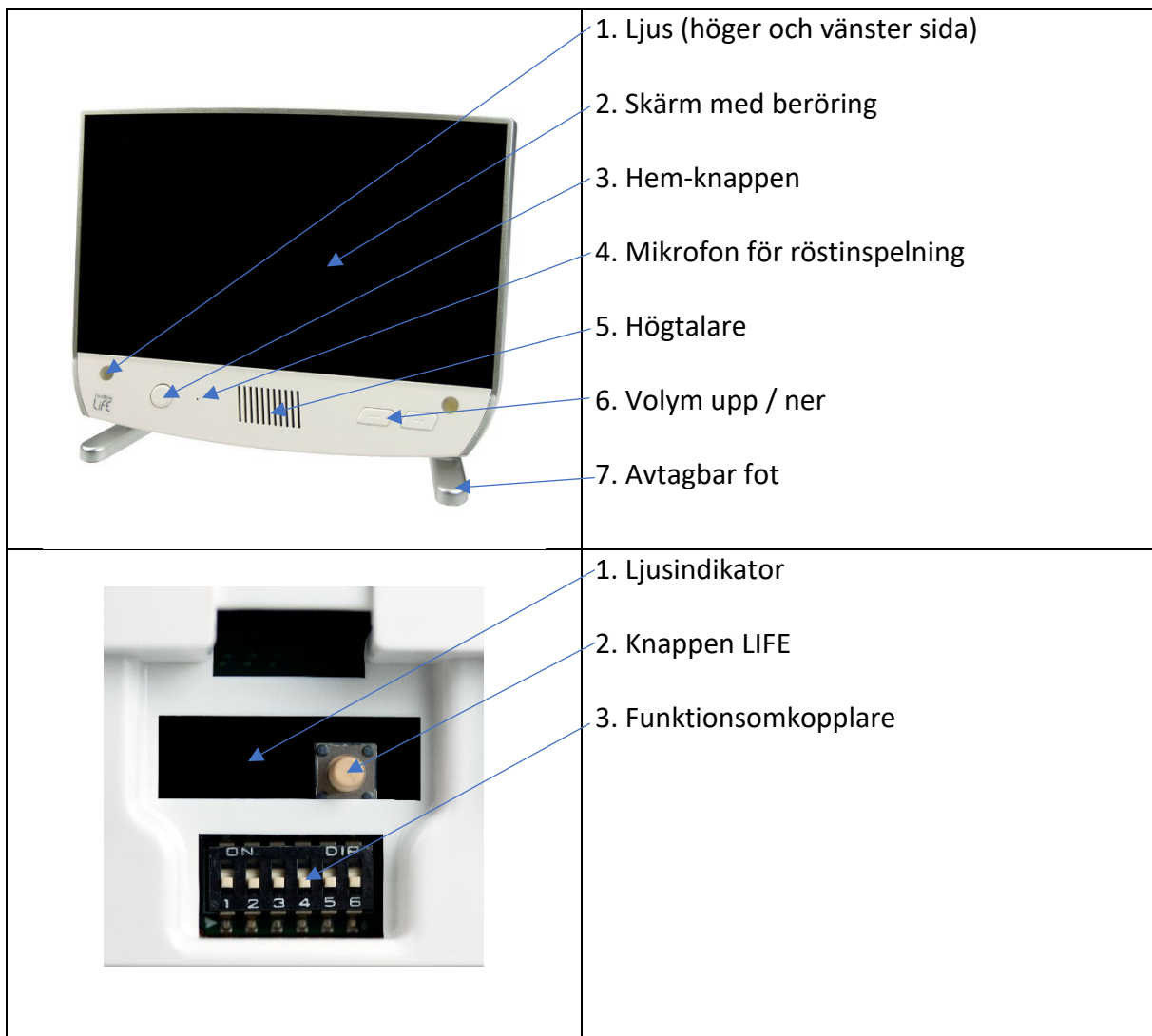




KOMMA IGÅNG

IRIS kan stå på ett bord i den medföljande basen eller skruvas upp på en vägg med det medföljande fästet.

Anslut strömförsörjningen till väggkontakten och anslut sladden till IRIS. Du kommer nu att se att skärmen startar. IRIS är redo att användas, men först måste den paras ihop med resten av dina FlexiBlink LIFE-produkter.

IHOPKOPPLING

Alla FlexiBlink LIFE-enheter som fungerar tillsammans måste paras ihop genom att trycka på LIFE-knappen. Life-knappen är placerad under IRIS baklucka

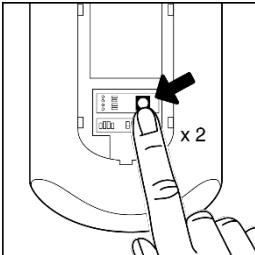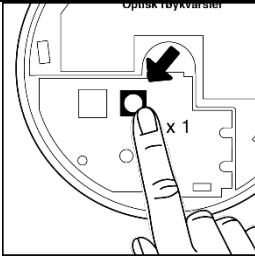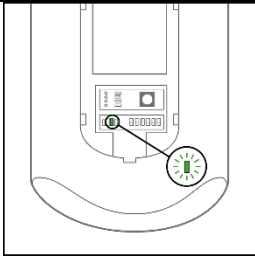Para ihop första gången		
		
1. Tryck på LIFE-knappen 2 gånger på en av enheterna.	2. Tryck på LIFE-knappen 1 gång på den andra enheten. Indikatorlamporna på båda enheterna blinkar grönt.	3. Parningen bekräftas genom att indikatorlamporna lyser ordentligt i 2-3 sekunder. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test" -knappen på en sändare för att kontrollera parningen.

Parning av ny enhet med befintligt system

1. Tryck på LIFE-knappen 2 gånger på enheten från befintligt system.
2. Tryck på LIFE-knappen 1 gång på den nya enheten.
3. Parningen bekräftas av indikatorlamporna som lyser fast grönt i 2-3 sekunder.
4. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test" -knappen för att kontrollera parningen.



Art nr. 203471653

Parkopplingen misslyckades

Om du får ett rött ljus i den nya enheten när du parkopplar misslyckades det. Återställ enheten för att återansluta. (Se nedan).

Avbryt parning

Om du vill avbryta en aktiv parkoppling trycker du på LIFE-knappen 1 gång.

Återställ parkopplingen

Tryck på LIFE-knappen 5 gånger på enheten där parkopplingen ska raderas. Detta bekräftas med röda och gröna blinkningar. Om du vill ändra produktens funktioner, se avsnittet "Utökade funktioner".

DAGLIG ANVÄNDNING Meddelande:

IRIS fungerar som en meddelandemottagare utan någon som helst aktiv användning. Händelser som inträffar i hemmets FlexiBlink LIFE-system meddelas automatiskt med ljud, ljus och video.

IRIS kommer ihåg den senaste varningen för en tid. Genom att trycka på skärmen inom två minuter efter att meddelandet är klart ser du vilket meddelande som visades. Om du vill titta på klockan under denna period – tryck på HOME-knappen.

VIKTIG! Larmen meddelas alltid på full volym.

Avbryt avisering:

Om du vill stoppa en pågående avisering kan du peka på skärmen eller trycka på HOME-knappen. Anmälan stoppas nu omedelbart. Om ett brandlarm stoppas på detta sätt kommer kommande nya larm inom en minut att meddelas med endast en symbol och ljus.

Justera volymen:

Använd volymomkopplaren (plus/minus) på höger framsida av IRIS för att justera volymen på dagliga aviseringar. Larm meddelas alltid med full styrka.

Klocka:

Om klockan är inställd och aktiverad (se kapitel 6), visas klockan och datumet när skärmen berörs eller HOME-knappen trycks in. Om en talande klocka är aktiverad kommer tid och dag också att läsas av automatiskt.

Väckarklocka:

IRIS har en inbyggd väckarklocka. Tryck på klocksymbolen i det nedre högra hörnet för att slå på / av larmet, samt välja tid. Det kan också väljas om du vill ha en snooze-funktion och om du vill ha ett larm på fasta dagar. Tryck på bakåtpilen på skärmen eller HOME-knappen när inställningen är klar. Alarmtiden visas nu bredvid klocksymbolen i det nedre högra hörnet av skärmen.


Väckarklockan varnar med ljud och ljus på skärmen. Den kan också meddela sängvibratorn trådlöst.

Timer:

IRIS har en praktisk nedräkningstimer. Detta visas med återstående tid på skärmen när timern startas.

INSTÄLLNINGSMENY: IRIS har en inställningsmeny för att ställa in väckarklocka, justera datum / tid, starta nedräkning / timer, ljusstyrka, samt se information om produkten och vilka funktioner som väljs.

Håll HOME-knappen intryckt i 2 sekunder. Inställningsmenyn visas nu. Menyn kan ha flera sidor med undermenyer. Du kan bläddra igenom sidorna genom att trycka på pilarna längst ner på skärmen.

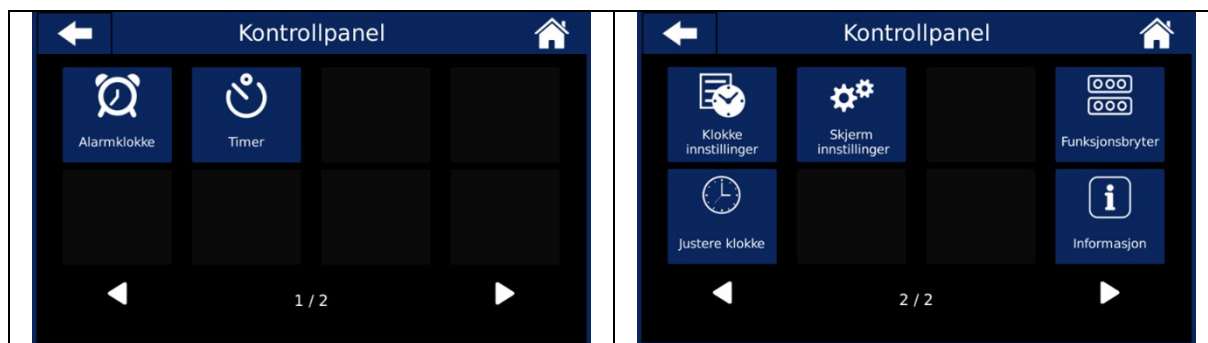

Meny: Väckarklocka:

Här väljs alarmtiden och om larmet ska vara aktivt eller inte. Det kan också väljas om du vill ha en snooze-funktion och om du vill ha ett larm på fasta dagar. Det här är samma sida som öppnas om du trycker på väckarklockans symbol i det nedre högra hörnet av skärmen. När du aktiverar väckarklockan aktiveras klockdisplayen också automatiskt.


Meny: Timer:

Välj Timer i menyn, ställ in nedräkningstiden och tryck på START. För att avbryta en pågående nedräkning, tryck på nedräkningsklockans display och sedan på "STOPP".

Meny: Klockinställningar:

Här kan du välja om klockan ska aktiveras och vilken typ av klocka som ska visas (digital / analog). Du kan också slå på / av talklockan och välja om den ska berätta vilken veckodag det är. Det kan också aktiveras för att visa tid på dagen (morgon / kväll / natt etc.).

Meny: Skärminställningar:

	<p>Här justeras skärmens ljusstyrka och om du vill ha en klocka som skärmsläckare. Här kan det också väljas ljusstyrka på detta.</p>
--	--

Meny: Funktionsomkopplare:

Det är här funktionsomkopplarens inställningar visas. Det går inte att ändra inställningar här. Omkopplarna manövreras på baksidan av IRIS.

Meny: Justera klocka:

Här ställs klocka och datum in. Välj rätt datum och tid - tryck sedan på "Ändra" för att ställa in den valda tiden.

Meny: Information:

Programvaruversion och liknande visas här. Används för förfrågningar till Vestfold Audio AS.

GRUNDLÄGGANDE INSTÄLLNINGAR

Funktionen växlar på baksidan av IRIS och låter dig ändra några grundläggande inställningar. Funktionerna kan kombineras fritt efter behov.

Endast dagliga signaler/larm – brytare 1



Med knapp 1 PÅ (upp) meddelar IRIS endast larm – såsom spisvakt, brandvarnare/brandvarnare etc.

Grannvarning – brytare 2



För att få en grannvarning i FlexiBlink LIFE-systemet måste en IRIS LIFE användas för installation. Sedan ställs varningsmottagarna in för att meddela vid brand eller inbrott hos berörda grannar. Om du inte vill att denna IRIS ska meddela från grannar kan du skjuta omkopplaren 2 uppåt. IRIS kopplas sedan bort från grannmeddelandet.

Obs! Grannvisering går bara på larmsignaler och inte för dagliga signaler som telefon och dörrklocka.

Tal – brytare 3



Med omkopplaren 3 ner slås röstfunktionen på. Då får du notiser med både aviseringsljud och beskrivande tal. Som standard är tal inaktiverat.

Välj sängvibrator – brytare 4



IRIS väckarklocka kan styras för att vakna i en av flera sängvibratörer i hemmet. Brytare 4 är för att välja vilken sängvibratörkanal IRIS ska starta. Kanel A (ner) är standardkanalen och upp är kanal B. Liknande val av kanal görs i sängvibratör(erna). (se användarhandbok för sängvibratör)

Skärmlås – brytare 5



Brytare 5 upp (ON) låser volymknappar och menyer. Genom att skjuta omkopplaren 5 upp låses volymen till aktuell nivå. Den här inställningen behålls även efter ett strömavbrott, och när du försöker justera volymen kommer skärmen att meddelas att skärmen är låst. Det kommer inte att vara möjligt att göra ändringar i skärmens layout när låset är på.

AVANCERAD KONTROLLPANEL

IRIS har ett antal möjligheter till anpassning, som användaren inte använder dagligen. Avancerad kontrollpanel används för installation och behovet av anpassningar till användaren och för att ställa in grannvarningar.

Om du har en Armbandssändare, en ELLA Smyckessändare eller en mottagare med signalutgångar kan dessa anpassas från en meny här.

Öppna Avancerad kontrollpanel: 1.


Tryck på hemknappen för att väcka skärmen om den är avstängd

2. Håll hemknappen intryckt.

3. Tryck samtidigt och omedelbart en gång på VOLUME DOWN och en gång på VOLUME UP i en snabb och jämn sekvens.

4. Håll hemknappen intryckt tills den avancerade kontrollpanelen visas.

Den avancerade kontrollpanelen består av två sidor, och du kan enkelt hoppa mellan dessa genom att trycka på pilarna längst ner i bilden.

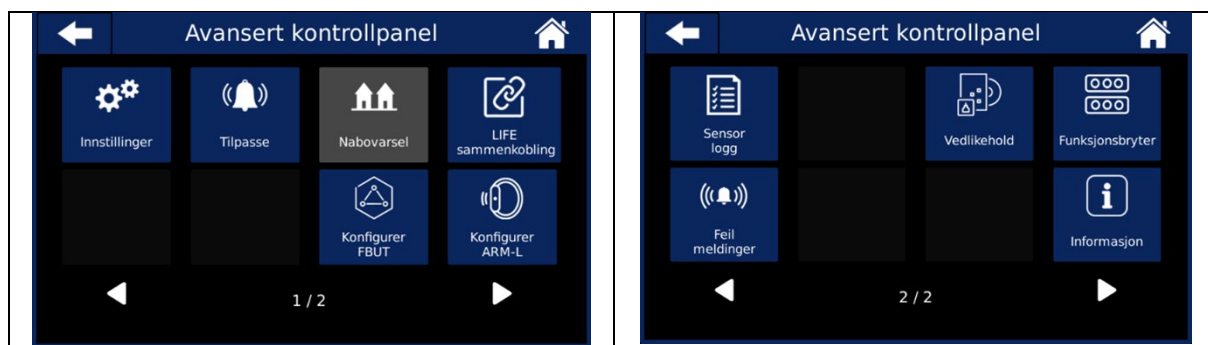

På varje sida finns knappar (ikoner) för att komma åt underliggende menyer (sidor) med avancerade funksjoner, som beskrivs i følgende.

Meny: Innstillinger:

Här kan du slå på / av følgende: -


Ljusvarning: blinkende lampor framför

- Visualiserat läge: ökad tydlighet i symboler

Här justeras också styrkan på skärmens bakgrunnsbelysning og styrkan hos den blinkende meddelandelampen. Dette kan vara användbart, till exempel när det används i sovrøm.

Meny: Anpassa:

Denna sida (-or) lister alle mottagna meddelanden - det vill säga alle avsändare i systemet som har skicket ett meddelande. (Gör det möjligt för en ny avsändare att hämta den i listan.)

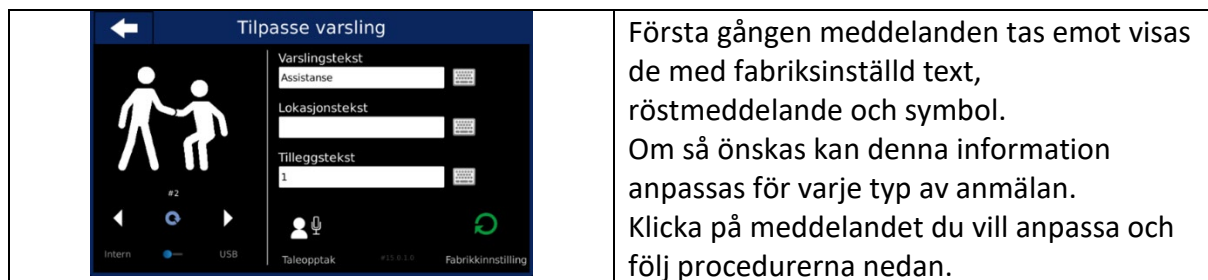

Ändra meddelandetexten:

Det finns 3 rader text som kan ange vad varningen handlar om:

Aviseringstext: Standardtexter som anger en överordnad varning, till exempel BRANDLARM.

Platstext: Används för extra information, till exempel var ett brandlarm utlöses (t.ex. 1:A våningen.)

Ytterligare text: Används för att ytterligare specificera anmälan, till exempel RUM 102.


Så här ändrar du:

1. Tryck på aviseringen du ändrar.
2. Tryck på textraden du vill ändra / skriva. 3. Ange text och tryck på "Enter".

Ändra meddelandeikon:

IRIS har ett antal inbyggda ikoner som du kan välja mellan, eller så kan du hämta dina egna foton från ett USB-minne som är insatt i USB-kontakten. Tryck på pilarna för att bläddra igenom ikonerna. Markeringen sparas automatiskt när du avslutar bilden.

Skapa ett röstmeddelande:

	<p>Tryck på "Röstmemo" så kommer du till den här sidan.</p>
---	---

Tryck på den röda knappen för att starta inspelningen. IRIS räknar ner och inspelningen startar. Du kan ange ett meddelande som är upp till 10 sekunder långt.

Tala in i mikrofonen med en normal röst på ett avstånd av 5-10 cm.

Inspelningen stoppas när 10 sekunder har gått eller du trycker på "Stopp".

Tryck på den gröna "Play" -knappen för att lyssna på inspelningen.

Om du inte är nöjd kan du upprepa.


Alternativt kan du trycka på "Fabriksåterställning" för att radera röstmeddelandet.

Meny: Grannvarning:

Med grannvarningsfunktionen kan du ta emot ALARMS från ett annat FlexiBlink LIFE-system och dela notiser i ditt FlexiBlink LIFE-system till ett annat system.

Obs! Grannvarningsfunktionen kräver att minst en FlexiBlink LIFE Repeater är installerad i systemet.

Obs! Para ihop LIFE-systemet i varje hem med Repeater genom att trycka på Life-knappen på IRIS 2 gånger och en gång på Life-knappen på Repeater.

	<p>När parkopplingen med Repeatern är klar öppnas återkomsten till sidan Grannvarning. (Ikonen på sidan går från grått till blått.)</p>
--	---


Av säkerhetsskäl, för att säkerställa att ingen "avlyssnar" på dina aviseringar, måste en verifiering med "PIN" -kod utföras i varje system.

Meny:

Översikt: Här är en lista över de grannar du valt att TA emot larm från. Du kan ange ditt namn och information, pausa kvittot och ta bort kvittot.



Meny: Dela med grannen:

Så här delar du ut och låter ett annat system få dina larm:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på "Dela med granne" 2. Nu visas en sida med 4-siffrig kod 3 . På grannens varningssida på grannens (mottagarens) Iris trycker grannen på "Ta emot från granne". 4. Grannen tar nu upp en sida och anger den 4-siffriga koden från din Iris. 5. När alla nummer har angetts söker FlexiBlink Life i systemen efter kontakt. 6. Om kontakt upprättas kommer du och din granne att meddelas att parnings-/grannvarningen är klar. 7. Om systemen inte kan hitta varandra kommer du att bli ombedd att försöka igen.
---	---

Meny: Ta emot från granne:

För att gå med på att ta emot larm från en granne, så här:

 <p>Motta fra nabo</p> <p>? ? ? ?</p> <p>Skriv inn tilkoblingskode fra nabo:</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p>	<ol style="list-style-type: none">1. På grannvarningssidan lär du dig "Ta emot från granne".2. Ange den 4-siffriga koden du fick från din granne.3. Du får ett meddelande på skärmen när grannmeddelandet skapas.4. Om du vill kan du gå in i "Översikt" och ange ditt namn.
 <p>Motta fra nabo</p> <p>3 5 9 3</p> <p>Venter på sender...</p> <p>Avbryt</p>	

Meny: Avsluta grannmeddelande:

Om du inte längre vill dela aviseringar med andra måste alla enheter i ditt FlexiBlink LIFE-system återställas och återanslutnas för att sluta skicka grannvarningar. Som mottagare av ALARMS från en granne kan du avsluta mottagningen av grannvarningar från varje granne på sidan "Redigera kontakter".

Meny: Historik:


Här är en lista över mottagna meddelanden nyligen. Detta är praktisk information vid installation och felsökning.

Meny: Funktionsomkopplare:

Inställningar från funktionsomkopplaren visas här. Det går inte att ändra inställningar här, bara visa vilka val som har gjorts på brytarna bakom.

Meny: Information:

Det är här programvaruversionen och associationsinformationen visas.

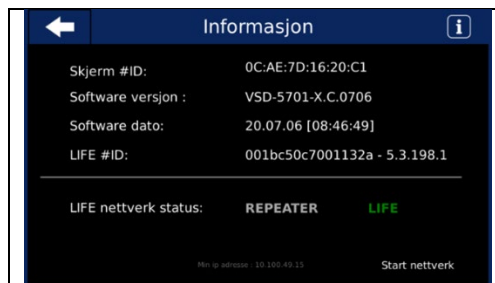	<p>Slutsatsen berättar om IRIS är ihopkopplad med andra FlexiBlink LIFE-enheter i systemet. När en repeater är ansluten till systemet blir texten "REPEATER" grön. Om IRIS tappar kontakten med repeatersystemet ändrar repeatern färg till rött.</p>
---	---

Meny: Underhåll:

	<p>Här kan installationen du har gjort kopieras till minnet som en säkerhetskopiering. Man kan också återställa installationen från ett minne. Detta är bekvämt för att kopiera dina egna texter och ljud till flera IRIS.</p> <p>Här finns också möjlighet att lägga till ny programvara till IRIS. Programvara kan erhållas från internet eller från ett minne. Kontakta ICAP AB om du behöver hjälp.</p> <p>IRIS kan också återställas till fabriksåterställning här. Då kommer alla ljud och anpassningar som de levereras att vara original.</p>
--	---

Meny: Konfigurera FBUT/Konfigurera Armbandssändare:


På dessa sidor finns funktioner för att anpassa Armbandssändare, ELLA Smyckessändare eller mottagare med signalutgångar som är sammankopplade i systemet.

Du kan:

- Lägg till ett enskilt visningsnamn till en entitet. -
- Ändra funktionalitet i Armbandssändare, ELLA Smyckessändare eller mottagare med signalutgångar. Dessa produkter är fabriksinställda för att skicka / ta emot vissa meddelanden, som kan ändras härifrån.

Enheterna som är kopplade till IRIS visas i en lista med produktnamn.

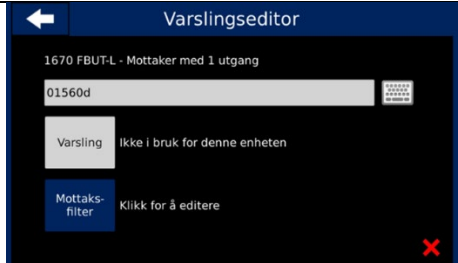

Lägga till/ändra ett namn:


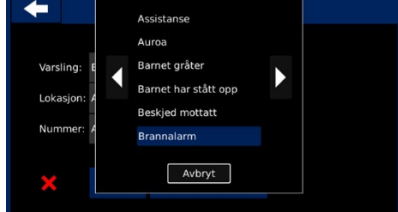
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klicka på raden för den enhet som du vill ge ett visningsnamn. 2. Ange namnet. 3. Tryck på "Enter".
---	--

Ändra funktion i en enhet:

1. Tryck på raden för den produkt du vill ändra.
2. Klicka på "Meddelande" eller "Mottagningsfilter" för att öppna ändringsmenyn.
3. Du får nu en sida med alternativ som är anpassade till produkten, till exempel:
 - a. Ändringsmeddelande skickat från ELLA Smyckessändare
 - b. Ändringsmeddelande skickat från Armbandssändare
 - c. Välj vilka meddelanden Armbandssändare ska ta emot och hur de ska meddelas.
 - d. Välj vilka varningar som ska signalera på Mottagare med signalutgångar och hur länge de ska pågå.
4. Tryck på bakåtpilen för att skicka inställningarna till den valda enheten.


Ändra funktion i Mottagare med signalutgångar:

	<p>Hitta den enhet du vill ändra funktion för i listan och tryck på namnet.</p>
	<p>Tryck på "Ta emot filter"</p>

	<p>Trykk på aviseringen du vill ändra.</p>
	<p>Välj önskad typ av meddelande i menyn och tryck på "Spara".</p>

Meny LIFE-parning:

Härifrån kan man börja para ihop med en annan FlexiBlink LIFE-enhet istället för att använda LIFE-knappen. Se kap.

	<p>Dela mitt LIFE-nät: Motsvarar 2 tryck på LIFE-knappen.</p> <p>Para ihop Iris med befintligt system: Motsvarar 1 tryck på LIFE-knappen.</p> <p>Återställ enhet: Motsvarar 5 tryck på LIFE-knappen.</p>
---	--

VIKTIG INFORMATION:

Produkten kan rengöras med en mjuk, lätt fuktig trasa. Produkten är avsedd för inomhusbruk i icke-kondenserande miljöer.

Produkten meddelar mottagarna om behovet av batteribyte om du har mottagare som visar detta.

Produkten ska inte lämnas i direkt solljus.

ANVÄNDNINGSBEGRENSNINGAR

Får endast användas inom EU/EES.



Art nr. 203471653

ÅTERVINNING

Produkten ska inte kasseras med restavfall. Bekanta dig med lokala bestämmelser för avfallshantering av elektriska produkter. Med rätt hantering kan stora delar av produkten återvinnas, samtidigt som miljön sparas.

SÄKERHET

Undvik att utsätta enheten för lågor och andra direkta värmekällor. Produkten får inte skruvas loss.

TEKNISKA DATA

Dim. (bxhxd):	218x165x40 mm (utan väggfäste och fot).	Sändareffekt:	10 mW e.r.p.
Vikt utan strömförsörjning:	800 g	Driftspänning:	15 VDC
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkaren Vestfold Audio AS förklarar att produkten uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU.

För fullständig dokumentation om överensstämmelse, tag kontakt via e-post:

upphandlingar@icap.nu

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösningar
Det går inte att para ihop	Indikatorlampa lyser rött efter sammankopplingsförsök	Enheten är redan ihopkopplad med andra enheter. Återställ parning.
	Indikatorlampan blinkar rött efter parningsförsök	Parkopplingen misslyckas. Försök igen.
	Indikatorlampan fortsätter att blinka grönt efter parning	Letar fortfarande efter nya enheter. Tryck på LIFE-knappen igen för att avbryta. Försök igen.
Efter TEST-tryck lyser sändaren rött	Enheten är inte ihopparad	Anslut enheten till en mottagare
Efter TEST-tryck lyser sändaren grönt under lång tid, sedan orange under lång tid	Ingen mottagare är ihopkopplad med sändaren	Kontrollera att det finns en mottagare i systemet. Återställ enheten. Återkoppla. Försök igen
Anmälan har inte mottagits	Inte parkopplad	Koppla ur den sista enheten och anslut den igen



ICAP
Individual Computer Applications

Art nr. 203471653

	Brist på täckning	Försök att flytta enheterna närmare varandra
	Brist på täckning	Ställ in en REPEATER
	Tomt batteri i sändare	Byt batteri i sändaren
	Avsändaren fungerar inte	Läs bruksanvisningen för sändaren
Anmälan är mottagen, men inget ljud	Volym justerad ned	Prova att justera volymen
	Ljudet av	Se till att ljudet inte är avstängt i den avancerade kontrollpanelen. Se kapitel 7
Meddelande tas emot med ljud men inget tal	Tal förnekas	Kontrollera att tal inte är inaktiverat (funktionsomkopplare 3)
Anmälan är mottagen, men ingen ficklampa	Lampan släcks	Se till att lamporna inte släcks eller justeras för lågt i den avancerade kontrollpanelen. Se kapitel 7
Klockan visar fel tid eller datum		Ställ klockan. Se kapitel 5
Klockan visar fel tid efter ett strömavbrott	Klockbatteriet är slut	Klockbatteriet laddas under en lång tid. Batteriet ska laddas i minst 4 dagar innan strömmen tas bort
Hur tar jag bort inspelningar och återställer inställningar?		Se kapitel 7
IRIS meddelar incidenter, men inga sändare aktiveras i hemmet.	Enheten är felaktigt ihopkopplad.	Återställ parkopplingen på din enhet och lägg till igen.
	Grannvarning	Kontrollera att funktionsomkopplaren Grannvarning är korrekt.
Det går inte att få kontakt med grannen	Repeater-L saknas i systemet	För att använda grannvarningar måste en REPEATER användas

