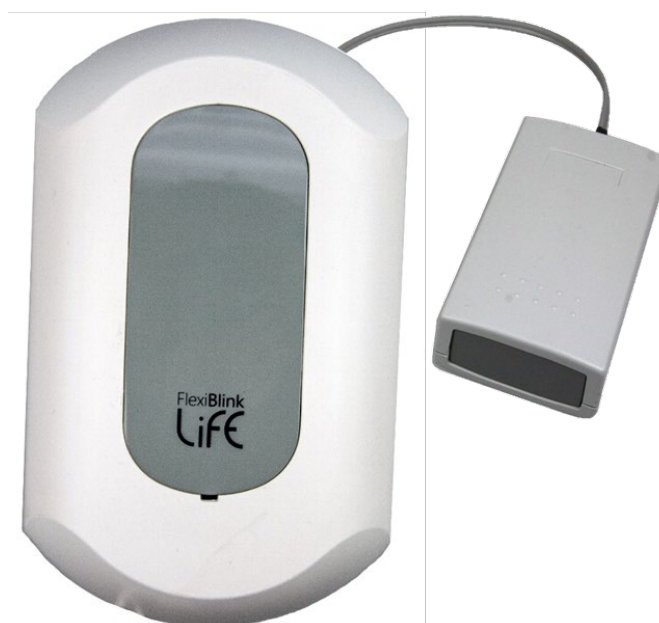




ICAP
Individual Computer Applications

Art. Nr. 203471656


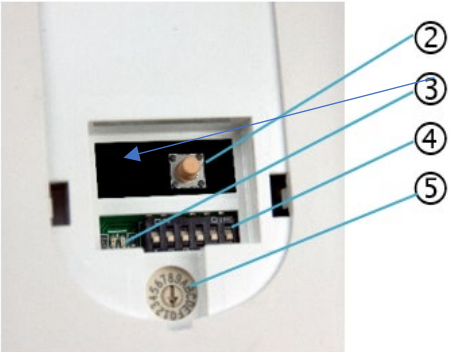
Kuddvibrator med nödbatteri och trådlös laddningsfelvarning Bruksanvisning



Kuddvibrator är en mottagare/larm som tar emot trådlösa signaler från FlexiBlink LIFE-detektorer/sändare installerade i hemmet. Kuddvibratören meddelar dig om dagliga incidenter och förhållanden av mer säkerhetskaraktär, allt beroende på vilka detektorer/sändare som är installerade och hur kuddvibratören är konfigurerad. För dagliga meddelanden inkluderar vi avisering av dörrklocka och telefon. Trygghetslarm kan vara till exempel spisvakt och brandvarnare.

Kuddvibratoren kan kopplas till en väckarklocka eller så kan du använda larmfunktionen i IRIS LIFE som fungerar trådlöst. Kuddvibratoren kommer att vakna av att vibrera med samma intensitet som med dagliga signaler. Vibrationen upphör automatiskt efter 2 minuter om väckarklockan inte stängs av.

Kuddvibratoren har ett inbyggt nødströmsbatteri och kommer därmed att fortsätta normal drift i minst 48 timmar vid strömavbrott. Den har också inbyggd trådlös laddningsfelmeddelande, och kommer att meddela FlexiBlink LIFE-mottagare i händelse av förlust av laddningsström.

	<p>Sängvibrator med ansluten sladd för väckarklocka och strömförsörjning.</p> <p>1 Öppna locket här.</p>
	<p>2. LIFE-knapp (sammankoppling) 3. Ljusindikator 4. Funktionsbrytare 5. Lägesbrytare</p>

KOMMA IGÅNG

Placering

Kuddvibratorns huvuddel kan monteras på en sänggavel, vägg eller sängbord.

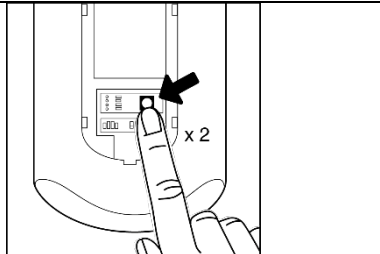
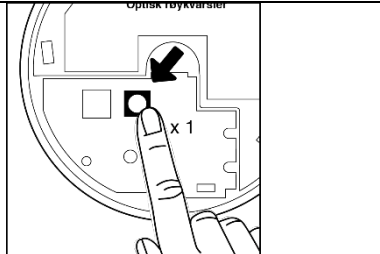
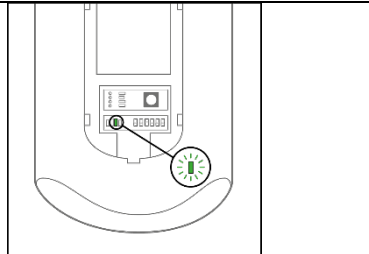
Vibratorn placeras normalt under toppmadrassen i höjd med kudden eller strax under kudden. Den kan med fördel placeras i ett örngott som fästs med säkerhetsnålar på madrassen.

Se till att tråden till vibratorn inte utsätts för sträckning.

Förbindelse

Anslut strömförsörjningen till vägguttaget. Om en väckarklocka ska användas, anslut väckarklockans kabel från kuddvibratorn till väckarklockan.

SAMMANKOPPLING

		
<p>1. Tryck på LIFE-knappen två gånger på en av enheterna.</p>	<p>2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den andra enheten. Indikatorlamporna på båda enheterna blinkar grönt.</p>	<p>3. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorlamporna lyser i 2-3 sekunder. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen på en sändare för att kontrollera sammankopplingen.</p>



Art. Nr. 203471656

ANSLUTNING AV NY ENHET TILL EXISTERANDE SYSTEM

1. Tryck på LIFE-knappen på enheten från det befintliga systemet två gånger.
2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den nya enheten.
3. Parningen bekräftas av att indikatorn lyser med fast grönt sken i 2-3 sekunder.
4. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen för att kontrollera ihopkopplingen.

KOPPLINGEN MISSLYCKADES

Om du får ett rött ljus i den nya enheten när den sammankopplades, misslyckades den. Återställ enheten för att återansluta. (Se nedan).

AVBRYT SAMMANKOPPLINGEN

För att avbryta en aktiv sammankoppling, tryck 1 gång på LIFE-knappen.

ÅTERSTÄLL ANSLUTNINGEN

Tryck på LIFE-knappen 5 gånger på enheten där anslutningen ska raderas. Detta bekräftas med röda och gröna blinkningar. Om du vill ändra funktioner i produkten, se avsnittet "Utökade funktioner".

DAGLIG ANVÄNDNING

Underrättelse:

Händelser som upptäcks i hemmets FlexiBlink LIFE-system aviseras automatiskt med vibration.

UTÖKADE FUNKTIONER:

Kuddvibratören är utrustad med en funktionsomkopplare och en lägesomkopplare bakom frontluckan. Du behöver inte ändra fabriksinställningen om du inte behöver funktionerna som förklaras i det här kapitlet.

Välja funktioner (funktionsomkopplare 4):

Grannmeddelande - switch 1

För att ta emot grannvarning i FlexiBlink LIFE-systemet måste en IRIS LIFE användas för installationen. Då är alla anmälningsmottagare inställda på att meddela vid brand eller inbrott hos berörda grannar.

Om du inte vill att Kuddvibratören ska meddela till grannarna kan du trycka strömbrytare 1 uppåt.

Kuddvibratören kopplas sedan bort från grannlarmet.



Art. Nr. 203471656

OBS! Grannvarning fungerar bara på larmsignaler, och inte för dagliga signaler som telefon och dörrklocka.

Trådlöst väckarklocka - switchar 2 och 3

IRIS LIFE kan skicka larmsignal trådlöst till Kuddvibratoren. Det finns möjlighet till två kanaler (A och B). Det betyder att om du har två IRIS LIFEs kan dessa skicka en larmsignal till var och en av deras kuddvibratorer. Switch 2 styr kanal A och switch 3 styr kanal B. Båda kanalerna är aktiverade som standard.

Om du vill inaktivera trådlös väckning kan du trycka switch 2 och/eller switch 3 uppåt.

Forcerad stilleståndsbrutare 6

Om Kuddvibratoren ska stängas av helt, t.ex. under transport, trycks strömbrytare 6 upp eller ner (endast byte av strömbrytarläge krävs) innan strömkontakten dras ur. Det kan också göras efter att strömkontakten har tagits bort. Sängvibratoren stängs av och kan bara startas igen när den är ansluten till ett eluttag.

OBS! Om strömbrytaren vrids medan sängvibratoren är på med laddningsspänning på, återgår den till normal drift om nätadaptern inte dras ur vägguttaget inom 2 minuter.

Kombinationer av funktionerna kan göras fritt efter behov med omkopplare 1 till 3. Omkopplare 4 och 5 är reserverade för framtida behov.

Välj läge (lägesomkopplare 5):

Vibration vid alla signaler (0)

Detta är fabriksinställningen. Kuddvibratoren varnar dig nu för alla signaler - både dagligen och larm.

Vibration endast för larm (1)

Om du vill att Kuddvibratoren inte ska meddela dig om dörrklocka och telefon kan du ställa vändaren i läge 1. Kuddvibratoren kommer nu endast att larma - förhållanden av säkerhetskaraktär (spisvakt, brandvarnare etc.).

OBS! Det kommer också att larma väckarklockan.

Vibration endast vid brand (2)

Om du vill att sängvibratoren endast ska larma vid BRAND kan du ställa omkopplaren i läge 2. Kuddvibratoren kommer nu endast att larma om brandlarm (rökvarnare och brandklocksändare). OBS! Det kommer också att larma väckarklockan.



Art. Nr. 203471656

VIKTIG INFORMATION:

Kuddvibratorn har två lampor, en grön och en röd. Den gröna lampan lyser konstant under strömdrift och blinkar under batteridrift. När Kuddvibratorn laddas lyser den röda lampan. Denna lampa växlar mellan på och av eftersom produkten laddas automatiskt vid behov.

Kuddvibratorn har inbyggt temperaturskydd och strömskydd och använder säker NiMH batteriteknik med en skonsam laddningscykel. Den har kontinuerlig övervakning inbyggd, så den kommer inte att utgöra någon risk eller fara när den används på rätt sätt.

Produkten kan rengöras med en mjuk, lätt fuktad trasa.

Produkten är avsedd för inomhusbruk i en icke-kondenserande miljö.

ANVÄNDNINGSBEGRENSNINGAR

Endast tillåtet att användas inom EU/EES.

ÅTERVINNING

Produkten får inte kastas med restavfall. Bekanta dig med lokala bestämmelser för avfallshantering av elektriska produkter. Med rätt hantering kan stora delar av produkten återvinnas samtidigt som miljön skyddas.

SÄKERHET

Undvik att utsätta enheten för lågor och andra direkta värmekällor. Produkten får inte skruvas loss.

TEKNISKE DATA

Dim. (bxhxd):	92x150x37mm	Sändareffekt:	10 mW e.r.p.
Vikt:	600 gram	Driftsspänning:	15 VDC/230VAC
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C

FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkaren Vestfold Audio AS intygar att produkten är i enlighet med direktiv 2014/53/EU.

För fullständig dokumentation om överensstämmelse, tag kontakt via e-post:

upphandlingar@icap.nu



ICAP
Individual Computer Applications

Art. Nr. 203471656

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösningar
Blir inte ansluten - ind. Lampan lyser rött	Anslutningen misslyckas pga för långt avstånd	Flytta enheterna närmare varandra och försök igen
	Enheten är redan sammankopplad med andra enheter.	Återställ sammankopplingen. Var god försök igen.
	Felaktig ordning i parningen	Tryck på LIFE-knappen två gånger på en enhet i det befintliga systemet och bara en gång på den nya enheten
Indikatorlampan fortsätter att blinka grönt efter parning	Har en enhets LIFE-knapp tryckts in två gånger?	Tryck på LIFE-knapparna igen för att avbryta. Försök igen.
	Letar fortfarande efter nya enheter.	Tryck på LIFE-knappen igen för att avbryta. Försök igen.
Anmälan ej mottagen	Inte ansluten	Koppla bort den senaste enheten och anslut igen
	Lägesomkopplaren är inställd på läge 1 eller 2	Ställ lägesomkopplaren i rätt läge
	Brist på täckning	Försök att flytta enheterna närmare varandra eller ställa in en repeater
	Avsändaren fungerar inte	Läs bruksanvisningen för sändaren
	Tömt batteri i sändaren	Byt ut batteriet i sändaren
	Enheten är felaktigt ansluten.	Återställ sammankopplingen på enheten och lägg till igen.
	Grannlarm	Kontrollera att funktionsomkopplaren för grannmeddelanden är korrekt.
	Nödbatteriet är svagt.	Ring service.
Kuddvibratorn varnar händelser, men inga sändare aktiveras i hemmet.	Enheten är inte ansluten	Anslut enheten till en mottagare

