


INSTRUKTIONER

Simple switch interface

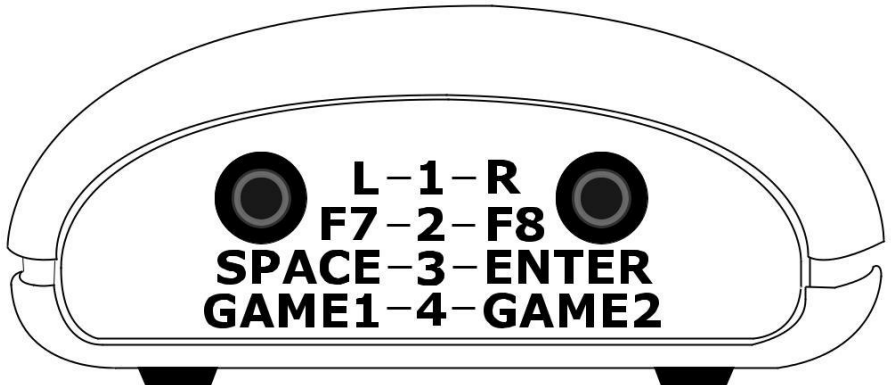

Innehåll

Kontrollera innehållet noggrant av lådan, som är:

Simple Switch Interface
Denna manual

Produktbeskrivning

Simple Switch Interface är ett enkelt och bekvämt sätt att ansluta upp till två switchar till en dator för att komma åt de flesta programvarupaket för hjälpmedel. Enheten kan konfigureras för att ge vänsterklick/högerklick, blanksteg/enter, F7/F8 (för Clicker-programvara*) eller Gamepad1/2 (för Grid-programvara*).

- USB-anslutning.
- Ingen ytterligare drivrutin krävs.
- PC och Mac kompatibilitet.
- Stöder Vänsterklick/Högerklick, Mellanslag/Enter, F7/F8 och Gamepad1/2.
- Behåller lägesinställning även när den stängs av.

Kompatibilitet

Simple Switch Interface är kompatibelt med alla PC- och Mac-plattformar utrustade med ett USB-uttag. Den kan inte anslutas till ett PS/2-uttag även med en adapterkontakt eftersom Simple Switch Interface använder funktioner som inte kan nås via PS/2-kontakten.

Installation

Se till att din dator är helt påslagen och uppstartad. Leta reda på ett ledigt USB-uttag på din dator och koppla in Simple Switch Interface. Enheten kommer att kännas igen automatiskt och de relevanta drivrutinerna laddas. Datorn berättar vanligtvis när installationen är klar, beroende på vilket operativsystem du har installerat. Simple Switch Interface är nu redo att användas.



Lägesinställning

Följande tabell bestämmer läget för varje uttag:

Summer	Vänster uttag	Höger uttag
1 Pip	Vänster klick	Högerklicka
2 pip	F7	F8
3 pip	Plats	Stiga på
4 pip	Gamepad 1	Gamepad 2

*Tabell 1:
Socketinställningar*

För att ändra lägesinställningen, tryck helt enkelt på den lilla knappen på enhetens bas (A i figur 1). Antalet pip som avges av summern indikerar den nya inställningen, enligt tabell 1. Den nya inställningen lagras i enhetens minne och återkallas när enheten slås på.

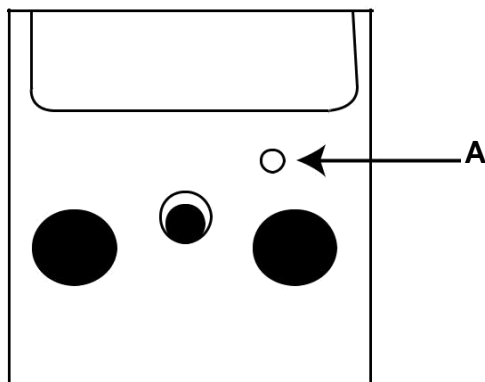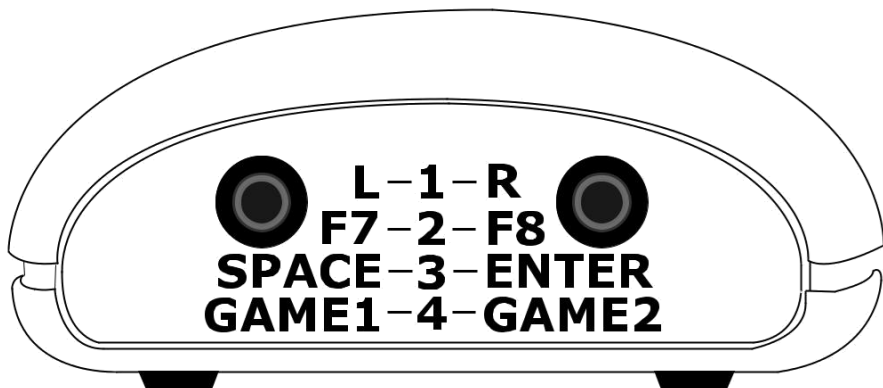

Figur 1

Underhåll

Din Simple Switch Interface har inga delar som användaren kan reparera. Om reparation blir nödvändig ska enheten returneras till Pretorian Technologies eller en auktoriserad distributör.

Garanti

Din Simple Switch Interface är garanterat mot tillverkningsdefekter och komponentfel. Enheten är designad för hushålls- och utbildningsapplikationer. Användning utanför dessa områden gör garantin ogiltig. Otillåten reparation eller modifiering, mekaniskt missbruk, nedsänkning i någon vätska eller anslutning till inkompatibel utrustning gör också garantin ogiltig.

Distributör

Svensk distributör:

Frölunda Data

Karl Johansgatan 42
414 59 GÖTEBORG

Telefon: 010-405 68 55

E-post: info@frolundadata.se
www.frolundadata.se

Pretorian
TECHNOLOGIES

Enhet 37 Corringham Road Industrial Estate
Gainsborough Lincolnshire DN21 1QB Storbritannien

Tel+44 (0) 1427 678990 Fax +44 (0) 1427 678992

SimplyWorks[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Pretorian Technologies Ltd.